

# ecomed



23100 10/2012

**SE**  
Bruksanvisning  
**GR** Οδηγίες χρήσης  
**CZ** Návod k použití  
**HU** Használati utasítás

**FOTBUBBELBAD**  
ΥΔΡΟΜΑΣΑΖ ΠΟΔΙΩΝ  
BUBLINKOVÁ VANIČKA NA NOHY  
LÁB-PEZSGŐFURDÓ MEDENCE



Teckenförklaring Ertejnyjona omybólikov Vysvětlivky symbolů Jelmagyarázat

**VIKTIGT! SΗMANTIKO DÜLEZITÉ FONTOSS**  
Om användningen i bruksanvisningen inte följs kan det leda till svåra personskador eller skador på apparaten.

Om den törptövönjöön következik a használata során sérülésekkel vagy a készülék meghibásodásához vezetett.

**VARNING! PROTEKTIONER VAROVÁNÍ FIGELMEZETÉS**  
Varningstexterna måste beaktas, annars kan det finnas risk för personskador.

Om du inte följer instruktionerna kan du få skador.

Nedvordinthohu többetől a használata során sérülésekkel vagy a készülék meghibásodásához vezetett.

Ezek az utasításoknak áfgyelmen kívül hagyása súlyos sérülésekhez vagy a készülék meghibásodásához vezetett.

**WARNING! PROTEKTIONER VAROVÁNÍ FIGELMEZETÉS**  
Varování o protekčních upozorněních představuje riziko zranění nebo poškození výrobku.

Dodržujte tyto výstrahy pokyny, zabráníte tak možnému úrazu uživatel.

A következő figyelemzésekkel lehet betartani, hogy a felhasználónak fenyegető sérülésekkel el lehessen kerülni.

**OBSERVERA! PΡΟΣΟΧΗ! POZOR! FIGELEM**

Kontroller först om apparaten är komplett och att den inte uppvisar några skador. I tvärsamma fall ska apparaten inte tas i bruk utan skickas in till ett servicecenter.

**ANVISNING! YΠΟΛΕΙΜΗ ΥΠΟΖΩΡΝΕΝΗ ΜΕΓJEGYZÉS**

Hu mindenkorban praktikus információval szolgálunk az összesrelelöséről és az üzemeltetésről.


**Skyddsklass II Klárovantról történő medence II Kryti II Védelmi osztály II**

**LOT** LOT-nummer **Apriðjós LOT** Číslo šarže **LOT szám**

Tillverkare Parapanyos Výrobce Gyártó

CE GS

## SE Säkerhetsanvisningar

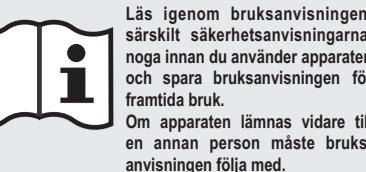

Läs igenom bruksanvisningen, särskilt säkerhetsanvisningarna, nog innan du använder apparaten och spara bruksanvisningen för framtida bruk.

Om apparaten lämnas vidare till en annan person måste bruksanvisningen följas med.



### Strömförsvärning

• Innan fotbadet ansluts till elnätet måste det kontrolleras att denna nätkontakten som anges på typskylten överensstämmer med aktuellt elnätet.

• Sätt endast nätkontakten i elnätet vid fotbadet.

• När elsladden är sladdad får apparaten inte användas mer. Av säkerhetsskäl får elsladden bara bytas av en autoriserad servicecentral.

• Tag inte i kontakten om du står i vatten och håll överhuvudtaget bort i kontakten med torra händer.

• Förstås inte ta upp i en apparat, som hamnat i vattnet. Skilj omgående nätkontakten från eluttaget.

• Håll fotbadet och kablar, borta från varma ytter.

• Undvik kontakt mellan fotbadet och spetsiga eller vassa föremål.

• Bär, drag eller vrid aldrig fotbadet i nätkabeln och kläm inte fast kabeln.

• Lägg kabeln på sådant sätt att det inte finns risk att snubbla.

• Stäng av alla funktioner efter användning och skilj kontakten från eluttaget.

### Särskilda grupper

• Den här apparaten får inte användas av personer med nedställd fysisk, sensorisk eller mental förmåga och/eller av personer som har för litet kännedom om apparaten om de inte står under uppsikt och instrueras av en annan ansvarig person. Detta gäller även för barn.

• Små barn måste hållas under uppsikt, så att de inte leker med apparaten.

• Kontakta din läkare om hälsoproblemet uppträder vid användning. Använd då inte fotbadet mer.

• Vid besvär med fotter, vid blodkärrsjuksomar eller diabetes skall läkaren konstateras innan fotbadet används. Vid oförklarliga smärtor eller svullnader bär läkare kontakten innan produkten används.

• Vid gradvisit rekommenderas att inhämta läkares råd för användning.

• Avbryt massage om smärtor uppträder under pågående behandling eller om svullnader kommer efteråt.

• Apparaten har en mycket varm yta. Personer som är värmekänsliga måste därför vara försiktiga när apparaten används.

### Om användningen

• Använd endast fotbadet till vad det, enligt bruksanvisningen, är avsett för. Om det används till annat än detta förhåller anspök på garanti.

• Produkten är inte avsedd för kommersiell användning.

• Använd inte produkten utomhus eller i fuktiga miljöer.

• Endast avsedd för privat användning.

• När apparaten ska användas ställer du den på ett stabilt och jämnt golv som är tåvlett.

• Använd bara apparaten med vatten, inte med andra vätskor.

• Använd bara lämpliga badtillsatser – inga tillsatser eller bärskötter som skummar.

• Stå inte i fotbadet eftersom det inte är konstruerad för belastning med full kropsvikt.

• Täck aldrig över badet när det används och använd det inte under kuddar och täcken.

• Om det tränger ut vatten från apparaten får den inte användas mer.

### Underhåll och rengöring

• Man får själv rengöra fotbadet. Föreliggande störningar skall man inte överlämna till garantiföretaget.

• Produkten är inte tillstånd att rengöras med vatten.

• Endast avsedd för privat användning.

• När apparaten ska användas ställer du den på ett stabilt och jämnt golv som är tåvlett.

• Använd bara apparaten med vatten, inte med andra vätskor.

• Använd bara lämpliga badtillsatser – inga tillsatser eller bärskötter som skummar.

• Stå inte i fotbadet eftersom det inte är konstruerad för belastning med full kropsvikt.

• Täck aldrig över badet när det används och använd det inte under kuddar och täcken.

• Om det tränger ut vatten från apparaten får den inte användas mer.

### Garanti och förutsättningar för reparations

Kontakta inköpsplattan vid garantifrågor, eller tag kontakt med kundtjänst direkt. Måste produkten skickas in i så bifoga uppgifter om defekten samt en kopik av inköpskvittot.

Följande garantiförutsättningar gäller:

1. ecomed produktur har två års garanti fr.o.m.

inköpsdatum. Inköpsdatum ska ges vid garantiförehanden förevisas med inköpskvittot eller faktura.

2. Felaktigheter på grund av material- eller tillverkningsfel åtgärdas kostnadsfritt under garantiperioden.

3. Utförande av garantitågande ledet inte till förlängning av garantiperioden; detta gäller för självförsam produkten.

4. Garantin gäller inte för:

a. Alla skador som uppkommer på grund av felaktig hantering, t.ex. vid icke beaktande av bruksanvisningen.

b. Skador som kan härledas till lörningsställande eller ingrep utövda av köparen eller annan, ej auktorisering, person.

c. Transportskador som uppkommit under transport till tillverkaren till användaren eller vid insändning till kundtjänst.

d. Felhöör som utsätts för normalt silitage.

5. Anvär för direkt eller indirekt följelskador som försörkas av produkten är utesluted, även om skadan på produkten godkänts som garantitågande.

ECOMED är ett märke från MEDISANA AG Jagdsbergstraße 19 41469 NEUSS TYSKLAND E-mail: info@medisana.de Internet: www.medisana.de

**Användning**

Med ecomed fotbubbelbad kan man skämma bort fötterna och slappa av efter en ansträngande dag. Man kan välja fotbad med massage under ungefär tio till femton minuter och genomföra detta en till två gånger om dagen. Man bör dock tänka på att produkten är kyls av hälften efter varje användning innan den startas!

ecomed fotbubbelbad lämpar sig för användning med vatten. Du kan fylla apparaten med varmt eller kallt vatten. Fotbadets värmefunktion är dock inte lämplig till uppvärmning av det ifyllda vattnet utan enbart till att fördroja avkylningen av vattnet.

ecomed fotbubbelbad kan man skämma bort fötterna och slappa av efter en ansträngande dag. Man kan välja fotbad med massage under ungefär tio till femton minuter och genomföra detta en till två gånger om dagen. Man bör dock tänka på att produkten är kyls av hälften efter varje användning innan den startas!

För servicefall, tillbehör och reservdelar kontaktar du:

Melitta Scandinavia AB Box 22227 250 24 Helsingborg phone: +46 / 20 43 51 77 fax: +46 / 20 15 60 website: www.melitta.se email: kundkontakt@melitta.se

**Användning**

Med ecomed fotbubbelbad kan man skämma bort fötterna och slappa av efter en ansträngande dag. Man kan välja fotbad med massage under ungefär tio till femton minuter och genomföra detta en till två gånger om dagen. Man bör dock tänka på att produkten är kyls av hälften efter varje användning innan den startas!

ecomed fotbubbelbad lämpar sig för användning med vatten. Du kan fylla apparaten med varmt eller kallt vatten. Fotbadets värmefunktion är dock inte lämplig till uppvärmning av det ifyllda vattnet utan enbart till att fördroja avkylningen av vattnet.

ecomed fotbubbelbad kan man skämma bort fötterna och slappa av efter en ansträngande dag. Man kan välja fotbad med massage under ungefär tio till femton minuter och genomföra detta en till två gånger om dagen. Man bör dock tänka på att produkten är kyls av hälften efter varje användning innan den startas!

För servicefall, tillbehör och reservdelar kontaktar du:

Melitta Scandinavia AB Box 22227 250 24 Helsingborg phone: +46 / 20 43 51 77 fax: +46 / 20 15 60 website: www.melitta.se email: kundkontakt@melitta.se

**Användning**

Med ecomed fotbubbelbad kan man skämma bort fötterna och slappa av efter en ansträngande dag. Man kan välja fotbad med massage under ungefär tio till femton minuter och genomföra detta en till två gånger om dagen. Man bör dock tänka på att produkten är kyls av hälften efter varje användning innan den startas!

ecomed fotbubbelbad lämpar sig för användning med vatten. Du kan fylla apparaten med varmt eller kallt vatten. Fotbadets värmefunktion är dock inte lämplig till uppvärmning av det ifyllda vattnet utan enbart till att fördroja avkylningen av vattnet.

ecomed fotbubbelbad kan man skämma bort fötterna och slappa av efter en ansträngande dag. Man kan välja fotbad med massage under ungefär tio till femton minuter och genomföra detta en till två gånger om dagen. Man bör dock tänka på att produkten är kyls av hälften efter varje användning innan den startas!

För servicefall, tillbehör och reservdelar kontaktar du:

Melitta Scandinavia AB Box 22227 250 24 Helsingborg phone: +46 / 20 43 51 77 fax: +46 / 20 15 60 website: www.melitta.se email: kundkontakt@melitta.se

**Användning**

Med ecomed fotbubbelbad kan man skämma bort fötterna och slappa av efter en ansträngande dag. Man kan välja fotbad med massage under ungefär tio till femton minuter och genomföra detta en till två gånger om dagen. Man bör dock tänka på att produkten är kyls av hälften efter varje användning innan den startas!

ecomed fotbubbelbad lämpar sig för användning med vatten. Du kan fylla apparaten med varmt eller kallt vatten. Fotbadets värmefunktion är dock inte lämplig till uppvärmning av det ifyllda vattnet utan enbart till att fördroja avkylningen av vattnet.

ecomed fotbubbelbad kan man skämma bort fötterna och slappa av efter en ansträngande dag. Man kan välja fotbad med massage under ungefär tio till femton minuter och genomföra detta en till två gånger om dagen. Man bör dock tänka på att produkten är kyls av hälften efter varje användning innan den startas!

För servicefall, tillbehör och reservdelar kontaktar du:

Melitta Scandinavia AB Box 22227 250 24 Helsingborg phone: +46 / 20 43 51 77 fax: +46 / 20 15 60 website: www.melitta.se email: kundkontakt@melitta.se

**Användning**

Med ecomed fotbubbelbad kan man skämma bort fötterna och slappa av efter en ansträngande dag. Man kan välja fotbad med massage under ungefär tio till femton minuter och genomföra detta en till två gånger om dagen. Man bör dock tänka på att produkten är kyls av hälften efter varje användning innan den startas!

ecomed fotbubbelbad lämpar sig för användning med vatten. Du kan fylla apparaten med varmt eller kallt vatten. Fotbadets värmefunktion är dock inte lämplig till uppvärmning av det ifyllda vattnet utan enbart till att fördroja avkylningen av vattnet.

